

# Nasal Aspirator

For baby's Nasal Secretion



Caution


The product only can be operated by adults. Potential choking hazard, keep all parts out of reach of children.



Pozor


Izdelek lahko uporabljajo le otroci v prisotnosti staršev. Zaradi vsebnosti manjših delcev obstaja možnost zadušitve!

## Vacuum use (EN)

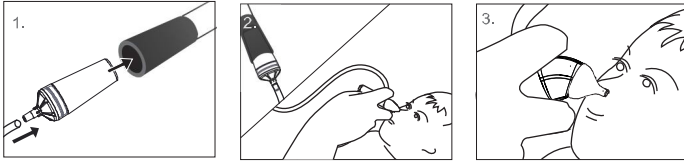

1. Assemble the device and insert the vacuum connector into the tube of the vacuum cleaner.
2. Placing baby on his/her back in a stable and comfortable position. Gently place the soft tip to baby's nostril.
3. Switch on the vacuum cleaner and adjust the necessary sucking force with the vacuum modulator of the vacuum cleaner.

## Mouth use

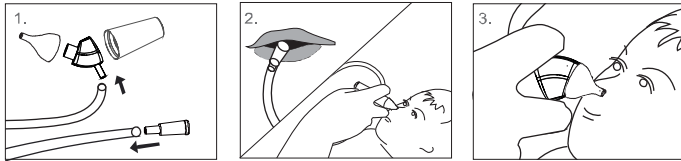


1. Connect mouth piece and hose, placing baby on his/her back in a stable and comfortable position.
2. Place mouth piece in mouth while holding baby with one hand and gently place the soft tip to baby's nostril, forming a seal.
3. Always begin by sucking gently and slowly until all loose mucus has been removed.

## How to clean after use

Disassemble Baby Aspirator, flush each part under running water after use. (All parts, except the external tank and cap, can be sterilized in boiled water.) After drying, keep the parts fitted and in a clean place.


| Part No.    | Material | sterilized boiled by water |
|-------------|----------|----------------------------|
| 5 6 8       | PP       | O                          |
| 1 3         | PS       | X                          |
| 2 4-1 4-2 7 | Silicone | O                          |

## Replacement

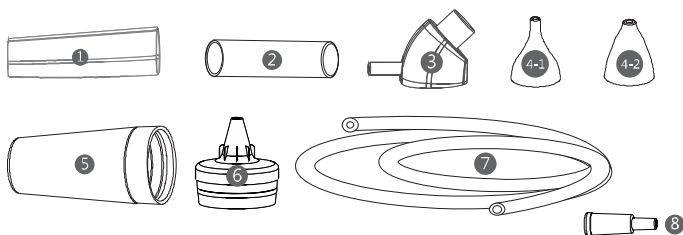


- 1). External tank
- 2). Internal silicone tube
- 3). Cap
- 4-1). Soft tip
- 4-2). Soft tip
- 5). Vacuum connector
- 6). Connection piece
- 7). hose
- 8). Mouth piece

## Uporaba s sesalnikom (SLO)

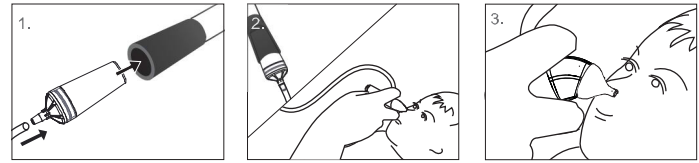

1. Sestavite aspirator. Uporabite nastavke za sesalnik in ga namestite v cev sesalnika.
2. Otroka položite na ravno, stabilno površino. Mehak nastavke priložite k otrokovi nosnici.
3. Vključite sesalnik in prilagodite jakost sesanja na sesalniku.

## Uporaba na vdih

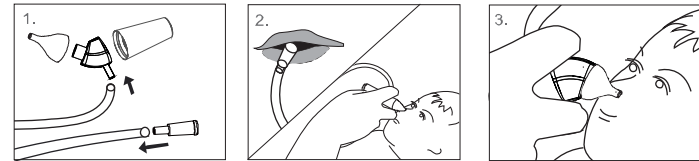


1. Povežite ustni nastavke in cevčico. Otroka položite na ravno, stabilno površino.
2. Ustni nastavke namestite v usta, hkrati pa držite otroka in namestite nosni nastavke k otrokovi nosnici.
3. Vedno pričnite z rahlim, nežnim vdihovanjem nato pa nadaljujte po potrebi.

## Čiščenje po uporabi

Razstavite aspirator in vsakega izmed sestavnih delov splaknite pod tekočo vodo. Vse sestavne dele razen zunanega dela posodice ter kapice lahko sterilizirate v vreli vodi. Po čiščenju vse dele osušite in shranite na primerno mesto.

| Številka dela | Material     | Možnost sterilizacije v vreli vodi |
|---------------|--------------|------------------------------------|
| 5 6 8         | Polipropilen | O                                  |
| 1 3           | Poliestiren  | X                                  |
| 2 4-1 4-2 7   | Silikon      | O                                  |

## Sestavni deli

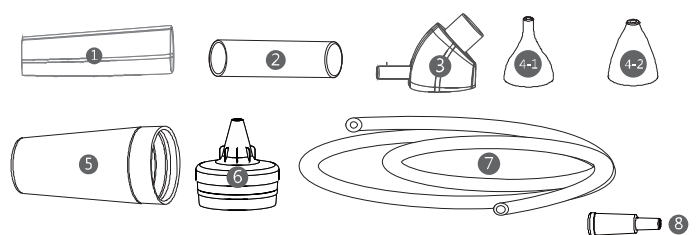

- 1). Zunanji del prozorne posodice
- 2). Notranji del prozorne posodice
- 3). Kapica
- 4-1). Silikonski nastavke
- 4-2). Silikonski nastavke
- 5). Nastavke za sesalec
- 6). Povezovalni del - vmesnik
- 7). Cevka
- 8). Nastavke za usta

# Nasal Aspirator

For baby's Nasal Secretion



Vorsicht


Das Produkt sollte möglichst nur von Erwachsenen bedient werden. Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie alle kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern.



Păcală


Dispozitivul se va utiliza doar de catre adulti. Risc de inecare. Pastrati toate partile departe de copii.

## Vakuum Einsatz (DE)

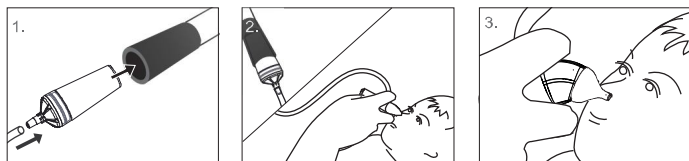

1. Montage Anleitung. Stecken Sie das Vakuum Verbindungs Stück (5) in Staubsauger Röhre.
2. Legen Sie das Baby auf den Rücken in eine stabile und komfortable Position. Platzieren Sie die weiche Kunststoff Spitze sanft in das Nasenloch.
3. Schalten Sie den Staubsauger an und regulieren Sie gegebenenfalls die notwendige Saugkraft.

## Mund Einsatz

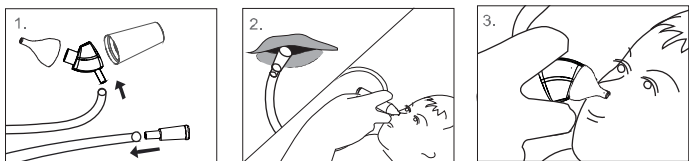


1. Verbinden Sie Mundstück (8) mit Schlauch (7), Legen Sie das Baby auf den Rücken in eine stabile komfortable Position.
2. Nehmen Sie das Mundstück zwischen Ihre Lippen, platzieren Sie die weiche Kunststoff Spitze sanft in das Nasenloch.
3. Beginnen Sie langsam und vorsichtig mit dem Saugen, bis die Nase Ihres Baby frei ist.

## Reinigung nach dem Gebrauch

Demontieren Sie das Baby Aspirator, spülen Sie jedes Teil unter fließendem Wasser nachdem Gebrauch aus. (Alle Teile mit Ausnahme der Außenbehälter und Verschlusskappe kann mit kochendem Wasser sterilisiert werden) Bewahren Sie alle Teile nach dem trocknen in einem sauberen Ort auf.


| Art.-Nr.    | Material | Sterilisiert |
|-------------|----------|--------------|
| 5 6 8       | PP       | O            |
| 1 3         | PS       | X            |
| 2 4-1 4-2 7 | Silizium | O            |

## Ersatz

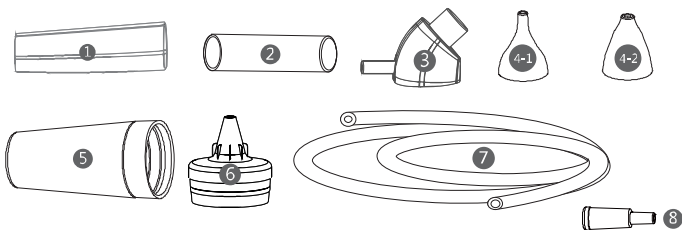


- |                     |                             |                     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1). Außenbehälter   | 4-1). Soft-Spitze           | 6). Verbindungstück |
| 2). Innenbehälter   | 4-2). Soft-Spitze           | 7). Schlauch        |
| 3). Verschlusskappe | 5). Vakuum Verbindungsstück | 8). Mundstück       |

## Utilizarea cu aspiratorul (RO)

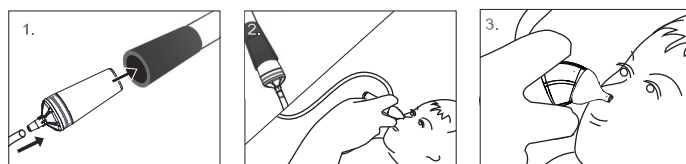

1. Asamblati dispozitivul si introduceti conectorul de aspirator in tubul aspiratorului.
2. Asezati copilul pe spate intr-o pozitie stabila si confortabila. Cu grija introduceti varful moale in nara copilului.
3. Porniti aspiratorul si ajustati forta de aspirare necesara cu modulatorul de aspirare al aspiratorului.

## Utilizarea cu gura

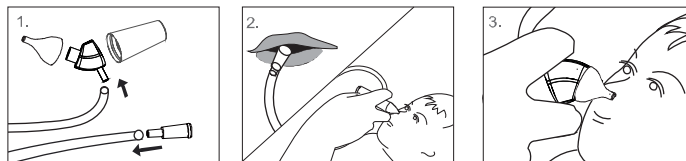


1. Conectati piesa pentru gura, de furtun. Asezati copilul pe spate intr-o pozitie stabila si confortabila.
2. Introduceti in gura piesa pentru gura in timp ce tineti copilul cu o mana, si introduceti cu grija varful moale in nara copilului formand un etans.
3. Intodeauna incepeti sa trageți bland si incet pana se elibera tot mucusul din nari.

## Cum se curata dupa utilizare

Dezasambalti Baby Aspirator, dupa fiecare utilizare si clatiti fiecare parte sub jet de apa. Toate partile se pot steriliza prin fierbere, cu exceptia capacului extern si al recipientului. Dupa uscare pastrati toate partile montate intr-un loc curat.

| Part No.    | Material | Sterilized boiled by water |
|-------------|----------|----------------------------|
| 5 6 8       | PP       | O                          |
| 1 3         | PS       | X                          |
| 2 4-1 4-2 7 | Silicon  | O                          |

## Replacement

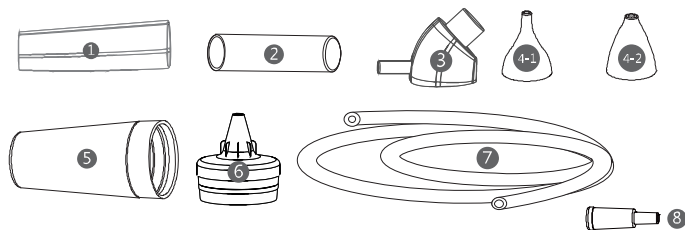

- |                      |                        |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1). Recipient extern | 4-1). Varf Moale       | 6). Piesa de conexiune |
| 2). Recipient intern | 4-2). Varf Moale       | 7). Furtun             |
| 3). Capac            | 5). Conector aspirator | 8). Piesa pentru gura  |