

HEALTH NORDIC

hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick (Urine)

REF FHC-101H | For Self-testing | English

【INTENDED USE】

The hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick (Urine) is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of human chorionic gonadotropin (hCG) in human urine to aid in the early detection of pregnancy.

【PRINCIPLE】

The hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick is a rapid, one-step lateral flow immunoassay for the qualitative detection of human chorionic gonadotropin (hCG) in urine to aid in the detection of pregnancy. The test utilizes a combination of antibodies including a monoclonal hCG antibody to selectively detect elevated levels of hCG. The assay is conducted by placing test into the urine, and obtaining the result from the colored lines.

【REAGENTS】

The test contains anti-hCG particles and anti-hCG coated on the membrane.

【PRECAUTIONS】

Please read all the information in this package insert before performing the test.

- Do not use after the expiration date printed on the foil pouch.
- Store in a dry place at 2-30 °C or 35.6-86 °F. Do not freeze.
- Do not use if pouch is torn or damaged.
- Keep out of the reach of children.
- For *in vitro* diagnostic use. Not to be taken internally.
- Do not open the test foil pouch until you are ready to start the test.
- The used test should be discarded according to local regulations.

【STORAGE AND STABILITY】

The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2-30 °C). Do not open the pouch until ready for use. **DO NOT FREEZE.** Do not use beyond the expiration date.

【SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION】

The urine specimen should be collected in a clean and dry container. A first morning urine specimen is preferred since it generally contains the highest concentration of hCG; however, urine specimens collected at any time of the day may be used. Urine specimens exhibiting visible particles should be centrifuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear specimen for testing.

If the urine specimen cannot be detected immediately, it should be stored at 2-8 °C for up to 48 hours prior to testing. For prolonged storage, specimens may be frozen and stored below -20 °C. Frozen specimens should be thawed and mixed before testing.

【MATERIALS PROVIDED】

- Test Dipstick
- Package Insert


【MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED】

- Timer
- Specimen Collection Container

【DIRECTIONS FOR USE】

Allow the test, specimen to reach room temperature (15-30 °C) prior to testing.

- Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test dipstick from the sealed pouch and use it within one hour.
- Place the test dipstick into urine for running (**Note:** Urine sample can't exceed the Maximum line on the test).
- Take the test dipstick out of urine sample after **15 seconds** or keep the test dipstick staying in the urine sample, start the timer immediately.
- Read the result at **3 minutes**; don't interpret the result after 10 minutes.

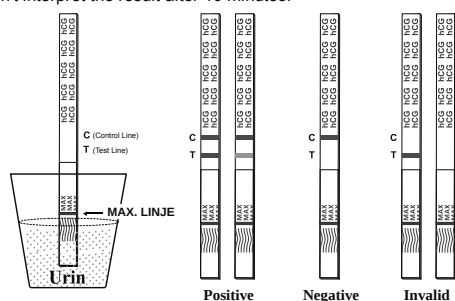

【READING THE RESULTS】

POSITIVE: Two colored lines appear. One colored line should be in the control line region (C) and another colored line should be in the test line region (T). One line may be lighter than the other; they do not have to match. This means that you are probably pregnant.

NEGATIVE: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line region (T). This means that you are probably not pregnant.

INVALID: The result is invalid if no colored line appears in the control line region (C), even if a line appears in the test line region (T). You should repeat the test with a new test.

【QUALITY CONTROL】

A procedural control is included in the test. A colored line appearing in the control line region (C) is considered an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking and correct procedural technique.

【LIMITATIONS】

There is the possibility that this test dipstick may produce false results. Consult your physician before making any medical decisions.

- Drugs which contain hCG (such as Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) can give a false positive result. Alcohol, oral contraceptives,

painkillers, antibiotics or hormone therapies that do not contain hCG should not affect the test result.

- Very dilute urine specimens, as indicated by a low specific gravity, may not contain representative levels of hCG. If pregnancy is still suspected, a first morning urine specimen should be collected 48 hours later and tested.
- Very low levels of hCG (less than 50 mIU/mL) are present in urine specimens shortly after implantation. However, because a significant number of first trimester pregnancies terminate for natural reasons,¹ a test result that is weakly positive should be confirmed by retesting with a first morning urine specimen collected 48 hours later.
- This test may produce false positive results. A number of conditions other than pregnancy, including trophoblastic disease and certain non-trophoblastic neoplasms including testicular tumors, prostate cancer, breast cancer, and lung cancer, cause elevated levels of hCG.^{2,3} Therefore, the presence of hCG in urine should not be used to diagnose pregnancy unless these conditions have been ruled out.
- This test may produce false negative results. False negative results may occur when the levels of hCG are below the sensitivity level of the test. When pregnancy is still suspected, a first morning urine specimen should be collected 48 hours later and tested. In case pregnancy is suspected and the test continues to produce negative results, see a physician for further diagnosis.
- This test provides a presumptive diagnosis for pregnancy. A confirmed pregnancy diagnosis should only be made by a physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated.

【EXTRA INFORMATION】

1. How does the test dipstick work?

HCG Pregnancy Rapid Test Dipstick detects a hormone in urine that body produces during pregnancy (hCG-human chorionic gonadotropin). The amount of pregnancy hormone increases as pregnancy progresses.

2. How soon after I suspect that I am pregnant can I take the test?

You can test your urine as early as the first day you miss your period. You can perform the test anytime of the day; however, if you are pregnant, first morning urine contains the most pregnancy hormone.

3. Do I have to test with first morning urine?

Although you can test at any time of the day, your first morning urine is usually the most concentrated of the day and would have the most hCG in it.

4. How accurate is the test?

A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick to another commercially available urine hCG test. The consumer clinical trial included 608 urine specimens: both assays identified 231 positive and 377 negative results. The results demonstrated >99% overall accuracy of the hCG Pregnancy Rapid Test Dipstick when compared to the other urine hCG test.

5. How sensitive is the test?

HCG Pregnancy Rapid Test Dipstick detects hCG in urine at a concentration of 25 mIU/mL or greater. The test has been standardized to the W.H.O. International Standard. The addition of LH (300 mIU/mL), FSH (1,000 mIU/mL), and TSH (1,000 μ U/mL) to negative (0 mIU/mL hCG) and positive (25 mIU/mL hCG) specimens showed no cross-reactivity.

6. What should I do if the result shows that I am pregnant?

It means that your urine contains hCG and you are probably pregnant. See your doctor to confirm that you are pregnant and to discuss the steps you should take.

7. How do I know that the test was run properly?

The appearance of a colored line in the control line region (C) tells you that you followed the test procedure properly and the proper amount of urine was absorbed.

8. What should I do if the result shows that I am not pregnant?

It means that no hCG has been detected in your urine and probably you are not pregnant. If you do not start your period within a week of its due date, repeat the test with a new test. If you receive the same result after repeating the test and you still do not get your period, you should see your doctor.

【BIBLIOGRAPHY】

- Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, *Obstet Gynecol.* 1984; 64(3): 391-394
- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, *Obstet. Gynecol.* 1977; 50(2): 172-181
- Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", *Ann. Intern Med.* 1973; 78(1): 39-45

Index of Symbols			
	Consult Instructions For Use		Tests per kit
	For <i>in vitro</i> diagnostic use only		Use by
	Store between 2-30 °C		Lot Number
	Do not use if package is damaged		Manufacturer
			Authorized Representative
			Catalog #

CE 0123



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster,
Germany

【TILSIGTET BRUG】

Graviditetstest (Urin) er en hurtig kromatografisk immunanalyse til kvalitativ detektion af humant choriongonadotropin (hCG) i human urin som en hjælp til tidlig påvisning af graviditet.

【PRINCIP】

Graviditetstest er en hurtig, ettrins lateral flow-immunanalyse til kvalitativ detektion af humant choriongonadotropin (hCG) i urin som en hjælp til påvisning af graviditet. Testen benytter en kombination af antistoffer, herunder et monoklonalt hCG-antistof, til selektivt at detektere forhøjede hCG-niveauer. Analysen udføres ved at sætte testen i urinen og aflæse resultatet fra de farvede streger.

【REAGENSER】

Testen indeholder anti-hCG-partikler og anti-hCG-antistof coatet på membranen.

【FORHOLDSREGLER】

Læs alle oplysningerne i denne indlægseddél, før du udfører testen.

- Brug ikke testen efter udløbsdatoen, der er trykt på folieposen.
- Opbevares på et tørt sted ved 2-30 °C eller 35,6-86 °F. Må ikke nedfryses.
- Må ikke anvendes, hvis posen er revnet eller beskadiget.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Til *in vitro*-diagnostisk brug. Må ikke indtages.
- Åbn ikke folieposen, før du er klar til at bruge testen.
- Den anvendte test skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

【OPBEVARING OG HOLDBARHED】

Sættet kan opbevares ved stuetemperatur eller nedkølet (2-30 °C). Posen bør ikke åbnes, før testen er klar til brug. **MÅ IKKE FRYSES.** Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

【PRØVETAGNING OG -KLARGØRING】

Urinprøven skal opsamles i en ren og tør beholder. En første morgenurinprøve foretrækkes, da den generelt indeholder den højeste koncentration af hCG. Urinprøver, der indsamles på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, kan dog anvendes. Urinprøver, der udviser synlige partikler, skal centrifugeres, filtreres eller bundfældes for at opnå en klar prøve til test.

Hvis urinprøven ikke kan testes med det samme, kan den opbevares ved 2-8 °C i op til 48 timer før testning. Til langtidsoptagelse kan prøverne fryses og opbevares under -20 °C. Frosne prøver skal optas og blandes, før de testes.


【MEDFØLGENDE MATERIALER】

- Tests
- Brugsanvisning
- NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER
- Timer
- Prøveindsamlingsbeholder

【BRUGERVEJLEDNING】

Lad testen og prøven nå stuetemperatur (15-30 °C) inden testning.

1. Lad posen opnå stuetemperatur, før den åbnes. Tag teststix'en ud af den forseglede pose, og brug den inden for en time.
2. Sæt teststix'en i urin for at foretage analysen (**Bemærk:** Urinprøver må ikke overstige maksimumstregen på testen).
3. Tag teststix'en ud af urinprøven efter **15 sekunder**, eller lad teststix'en blive i urinprøven, og start timeren med det samme.
4. Aflæs resultatet efter **3 minutter**. Efter 10 minutter må resultatet ikke fortolkes.

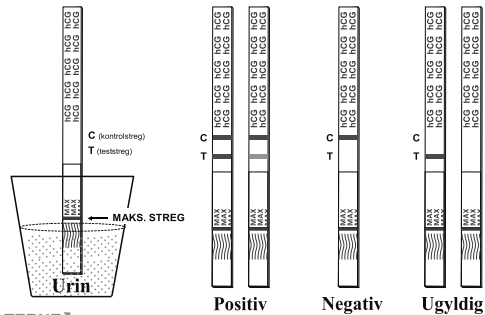

【AFLÆSNING AF RESULTATERNE】

POSITIV: Der vises to farvede streger. Der skal være en farvet streg i kontrolstregområdet (C), og en anden farvet streg i teststregområdet (T). Den ene streg kan være mindre tydelig end den anden. De behøver ikke at stemme overens. Det betyder, at du sandsynligvis er gravid.

NEGATIV: Der vises en farvet streg i kontrolstregområdet (C). Der vises ingen streg i teststregområdet (T). Det betyder, at du sandsynligvis ikke er gravid.

UGYLDIG: Resultatet er ugyldigt, hvis der ikke vises en farvet streg i kontrolstregområdet (C), selvom der vises en streg i teststregområdet (T). Du bør gentage testen med en ny test.

【KVALITETSKONTROL】

En procedurekontrol er inkluderet i testen. En farvet streg, der vises i kontrolstregområdet (C), betragtes som en intern procedurekontrol. Det bekræfter tilstrækkelig prøvevolumen, tilstrækkelig membranopsugning og korrekt procedureteknik.

【BEGRÆNSNINGER】

Der er mulighed for, at denne teststix kan give falske resultater. Kontakt din læge, før du tager medicinske beslutninger.

1. Lægemidler, der indeholder hCG (såsom Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), kan give et falsk positivt resultat. Alkohol, p-piller, smertestillende midler, antibiotika eller hormonbehandlinger, der ikke indeholder hCG, bør ikke påvirke testresultatet.
2. Meget fortyndede urinprøver, som angivet ved en lav specifik vægtfylde, indeholder muligvis ikke repræsentative hCG-niveauer. Hvis

der stadig er mistanke om graviditet, skal der indsamles og testes en første morgenurinprøve 48 timer senere.

3. Meget lave hCG-niveauer (mindre end 50 mIU/ml) er til stede i urinprøver kort efter implantation. Da et betydeligt antal graviditeter i første trimester imidlertid ophører af naturlige årsager, skal et testresultat, der er svagt positivt, bekræftes ved at genteste med en første morgenurinprøve, der indsamles 48 timer senere.
4. Denne test kan give falske positive resultater. En række andre tilstande end graviditet, herunder trofoblastisk sygdom og visse ikke-trofoblastiske neoplasmer, herunder testikeltumorer, prostatakkræft, brystkræft og lungekræft, forårsager forhøjede hCG-niveauer.^{2,3} Tilstedeværelsen af hCG i urin bør derfor ikke anvendes til at diagnosticere graviditet, medmindre disse tilstande er blevet udelukket.
5. Denne test kan give falske negative resultater. Falske negative resultater kan forekomme, når hCG-niveauerne er under testens følsomhedsniveau. Hvis der stadig er mistanke om graviditet, skal der indsamles og testes en første morgenurinprøve 48 timer senere. Hvis der er mistanke om graviditet, og testen fortsætter med at give negative resultater, skal du kontakte en læge for yderligere diagnose.
6. Denne test giver en formodet diagnose for graviditet. En bekræftet graviditetsdiagnose må kun foretages af en læge, efter at alle kliniske fund og laboratorieresultater er blevet evalueret.

【EKSTRA OPLYSNINGER】

1. Hvordan fungerer teststix'en?

Graviditetstest detekterer et hormon i urinen, som kroppen producerer under graviditet (hCG - humant choriongonadotropin). Mængden af graviditetshormon øges, efterhånden som graviditeten skrider frem.

2. Hvor hurtigt kan jeg tage testen, efter at jeg har mistanke om, at jeg er gravid?

Du kan teste urinen så tidligt som den første dag, din menstruation udebliver. Du kan udføre testen på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, men hvis du er gravid, indeholder den første morgenurin mest graviditetshormon.

3. Skal jeg teste med den første morgenurin?

Selvom du kan teste på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, er din første morgenurin normalt den mest koncentrerede i løbet af dagen, og den ville have mest hCG i sig.

4. Hvor nøjagtig er testen?

Der blev udført en klinisk evaluering, der sammenlignede de resultater, der blev opnået ved brug af Graviditetstest med en anden kommercielt tilgængelig urintest for hCG. Det kliniske forbrugerforsøg omfattede 608 urinprøver: Begge analyser identificerede 231 positive og 377 negative resultater. Resultaterne viste > 99 % samlet nøjagtighed af Graviditetstest sammenlignet med den anden urintest for hCG.

5. Hvor følsom er testen?

Teststix til hurtig graviditetstest (hCG) detekterer hCG i urin ved en koncentration på 25 mIU/ml eller derover. Testen er standardiseret til WHO's internationale standard. Tilsætningen af LH (300 mIU/ml), FSH (1.000 mIU/ml) og TSH (1.000 µIU/ml) til negative (0 mIU/ml hCG) og positive (25 mIU/ml hCG) prøver viste ingen krydsreaktivitet.

6. Hvad skal jeg gøre, hvis testresultatet viser, at jeg er gravid?

Det betyder, at din urin indeholder hCG, og at du er sandsynligvis gravid. Kontakt din læge for at få bekræftet, at du er gravid, og for at drøfte de skridt, du bør tage.

7. Hvordan ved jeg, at testen blev udført korrekt?

Når der vises en farvet streg i kontrolstregområdet (C), fortæller det dig, at du fulgte testproceduren korrekt, og at den korrekte mængde urin blev absorberet.

8. Hvad skal jeg gøre, hvis testresultatet viser, at jeg ikke er gravid?

Det betyder, at der ikke er registreret hCG i urinen, og at du sandsynligvis ikke er gravid. Hvis din menstruation ikke starter inden for en uge efter den forventede dato, skal du gentage testen med en ny test. Hvis du får det samme resultat efter at have gentaget testen, og du stadig ikke får din menstruation, skal du kontakte din læge.

Distributør:

Health Nordic A/S
Roskildevej 328
2630 Taastrup, Danmark
info@health-nordic.com

【BIBLIOGRAFI】

1. Steier JA, P Bergsjo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394
2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Oversigt over symboler

	Se brugsanvisningen, eller se den elektroniske brugsanvisning		Indeholder tilstrækkeligt til <n> test		Temperaturgrænse
	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik		Batchkode		Katalognummer
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, og se brugsanvisningen		Sidste anvendelsesdato		Må ikke genbruges
	Forsigtig		Producent		Autoriseret repræsentant i EU

【BEREGNET BRUK】

Graviditetstest er en rask, kromatografisk immunanalyse for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin i human urin (hCG) for å hjelpe til med tidlig påvisning av graviditet.

【PRINSIPP】

hCG-graviditetstesten (peilepinne) er en rask, ettrinns immunanalyse basert på lateral strømning i form av en peilepinne for kvalitativ påvisning av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Dette er for å hjelpe til med påvisning av graviditet. Testen bruker en kombinasjon av antistoffer, inkludert et monoklonalt hCG-antistoff, for selektivt å oppdage forhøyede nivåer av hCG. Analysen gjennomføres ved å tilsette urin i prøven og lese av resultatet ved hjelp av de fargede linjene.

【REAGENSER】

Testen inneholder anti-hCG-partikler og anti-hCG belagt på membranen.

【FORSIKTIGHETSREGLER】

Les all informasjon i dette pakkingsvedlegget før du utfører testen.

- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på folieposen.
- Oppbevares på et tørt sted ved 2–30 °C. Må ikke fryses.
- Ikke bruk testen hvis posen er skadet.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Til *in vitro*-diagnostisk bruk. Skal ikke brukes innvortes.
- Ikke åpne testens foliepose før du er klar til å begynne testen.
- Den brukte testen skal kastes i henhold til lokale forskrifter.

【OPPBEVARING OG STABILITET】

Settet kan lagres i romtemperatur eller i kjøleskap (2–30 °C). Ikke åpne posen før den er klar til bruk. **MÅ IKKE FRYSES.** Må ikke brukes etter utløpsdato.

【PRØVETAKING OG KLARGJØRING】

Urinprøven skal samles i en ren og tørr beholder. Prøve av den første morgenurinen foretrekkes siden den vanligvis inneholder den høyeste konsentrasjonen av hCG, men urinprøver tatt når som helst på dagen, kan brukes. Urinprøver som viser synlige partikler, bør sentrifugeres, filtreres eller settes til side for å få klare prøver for testing.

Hvis urinprøven ikke kan testes umiddelbart, kan den oppbevares ved 2–8 °C i opptil 48 timer før testing. For langvarig lagring kan prøver fryses og lagres i temperaturer som er lavere enn –20 °C. Frosne prøver skal lines og blandes før testing.

【MATERIALER SOM FØLGER MED】

- Tester
- Bruksanvisning


【NØDVENDIGE MATERIALER SOM IKKE FØLGER MED】

- Tidtaker
- Prøvebeholder

【BRUKSANVISNING】

La testen og prøven nå romtemperatur (15–30 °C) før testing.

1. La posen nå romtemperatur før du åpner den. Ta peilepinnen ut av den forseglede posen, og bruk den innen én time.
2. Sett peilepinnen i urinen før utføring (**Merk:** Urinprøven må ikke fylles til over maksimumslinjen).
3. Ta peilepinnen ut av urinprøven etter **15 sekunder**, eller hold peilepinnen i urinprøven. Start tidtakeren umiddelbart.
4. Les av resultatet etter **3 minutter**. Ikke tolk resultatet etter 10 minutter eller mer.

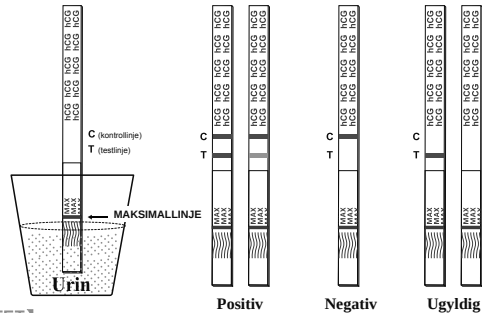

【SLIK TOLKER DU RESULTATET】

POSITIVT: Det vises to fargede streker. En farget strek skal være i kontrollinjeområdet (C), og en annen farget strek skal være i testlinjeområdet (T). En linje kan være lysere enn den andre, de trenger ikke å være like. Dette betyr at du sannsynligvis er gravid.

NEGATIV: Det vises én farget linje i kontrollinjeområdet (C). Ingen strek vises i testlinjeområdet (T). Dette betyr at du sannsynligvis ikke er gravid.

UGYLDIG: Resultatet er ugyldig hvis det ikke vises en farget strek i kontrollinjeområdet (C), selv om en strek vises i testlinjeområdet (T). Du bør gjenta testen med en ny test.

【KVALITETSKONTROLL】

En prosedyrekontroll er inkludert i testen. En farget strek som vises i kontrollinjeområdet (C), regnes som en intern prosedyrekontroll. Det bekrefter tilstrekkelig prøvevolum, tilstrekkelig membrantransport og korrekt prosedyreteknikk.

【BEGRENSNINGER】

Det er mulig at denne peilepinnen viser falske resultater. Snakk med en lege før du tar medisinske beslutninger.

1. Legemidler som inneholder hCG (som pregnyl, profasi, pergonal, APL), kan føre til et falskt positivt resultat. Alkohol, orale prevensjonsmidler, smertestillende midler, antibiotika eller hormonbehandling som ikke inneholder hCG, skal ikke påvirke testresultatet.

2. Det kan hende at svært fortynnede urinprøver, som indikeres ved lav spesifikk egenvekt, ikke inneholder representative nivåer av hCG. Hvis du fortsatt mistenker at du er gravid, bør du ta en urinprøve av den første morgenurinen 48 timer senere og teste denne.
3. Svært lave nivåer av hCG (mindre enn 50 mIU/ml) finnes i urinprøver kort tid etter implantasjon. Ettersom et betydelig antall svangerskap avsluttes av naturlige årsaker i første trimester,¹ bør et testresultat som er svakt positivt, bekreftes ved å teste en prøve av den første morgenurinen tatt 48 timer senere.
4. Denne testen kan vise falske positive resultater. En rekke andre tilstander enn graviditet, inkludert trofoblastsykdom og enkelte ikke-trofoblastiske neoplasier, herunder testikkelsvulster, prostatakreft, brystkreft og lungekreft, forårsaker forhøyede nivåer av hCG.^{2,3} Derfor bør tilstedeværelse av hCG i urin ikke brukes til å diagnostisere graviditet med mindre disse tilstandene er utelukket.
5. Denne testen kan vise falske negative resultater. Falske negative resultater kan forekomme når hCG-nivåene er under følsomhetsnivået i testen. Hvis du fortsatt mistenker at du er gravid, bør du ta en prøve av den første morgenurinen 48 timer senere og teste denne. Hvis du mistenker at du er gravid, og testen fortsetter å vise negative resultater, ta kontakt med en lege for å stille diagnose.
6. Denne testen gir en presumptiv diagnose for graviditet. En sikker graviditetsdiagnose bør bare stilles av en lege etter at alle kliniske funn og laboratoriefunn er vurdert.

【EKSTRA OPPLYSNINGER】

1. Hvordan fungerer peilepinnen?

Graviditetstest kan påvise tilstedeværelse av et hormon i urinen som kroppen produserer under graviditet (hCG, humant koriongonadotropin). Mengden graviditetshormon øker med graviditeten.

2. Hvor langt etter at jeg har mistanke om at jeg er gravid, kan jeg ta testen?

Du kan teste urinen din allerede første dagen etter uteblitt menstruasjon. Du kan gjennomføre testen når som helst på dagen, men den første morgenurinen inneholder høyest konsentrasjon av graviditetshormon dersom du er gravid.

3. Må jeg teste med den første morgenurinen?

Selv om du kan teste når som helst på dagen, er den første morgenurinen vanligvis dagens mest konsentrerte, og den vil inneholde mest hCG.

4. Hvor nøyaktig er testen?

Det har blitt gjennomført en klinisk vurdering der resultatene fra Graviditetstest ble sammenlignet med en annen kommersielt tilgjengelig test for påvisning av hCG i urin. Den kommersielle kliniske studien omfattet 608 urinprøver. Begge analysene identifiserte 231 positive og 377 negative resultater. Resultatene viste > 99 % total nøyaktighet for Graviditetstest sammenlignet med den andre testen for påvisning av hCG i urin.

5. Hvor følsom er testen?

Graviditetstest påviser hCG i urin når konsentrasjonen er på 25 mIU/ml eller mer. Testen er standardisert i henhold til WHO's internasjonale standard. Tilsetning av LH (300 mIU/ml), FSH (1000 mIU/ml) og TSH (1000 µIU/ml) i negative (0 mIU/ml hCG) og positive (25 mIU/ml hCG) prøver viste ingen kryssreaktivitet.

6. Hva skal jeg gjøre hvis resultatet viser at jeg er gravid?

Det betyr at urinen inneholder hCG, og at du sannsynligvis er gravid. Kontakt legen din for å få bekreftet at du er gravid og diskutere hva du skal gjøre.

7. Hvordan vet jeg at testen ble utført riktig?

En farget linje i kontrollinjeområdet (C) forteller deg at du har gjennomført testen på riktig måte, og at riktig mengde urin ble absorbert.

8. Hva skal jeg gjøre hvis resultatet viser at jeg ikke er gravid?

Det betyr at det ikke er påvist hCG i urinen din, og at du sannsynligvis ikke er gravid. Hvis du ikke får menstruasjon innen én uke etter forventet dato, kan du ta en ny test. Hvis du får samme resultat etter å ha tatt en ny test og du fortsatt ikke får menstruasjon, bør du kontakte legen din.

Distribuert av:

Health Nordic A/S
Roskildevej 328
2630 Taastrup, Denmark
info@health-nordic.com

【BIBLIOGRAFI】

1. Steier JA, P Bergsjo, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394
2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Abund. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Symboloversikt

	Se bruksanvisningen på papir eller elektronisk		Innholdet er nok til <n> tester		Temperaturgrense
	In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr		Partikode		Katalognummer
	Ikke bruk testen hvis posen er skadet. Se bruksanvisningen		Brukes innen		Skal ikke gjenbrukes
	Forsiktig		Produsent		Autorisert representant i EU



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster,
Germany

【AVSEDD ANVÄNDNING】

Graviditetstest (Urin) är en snabb kromatografisk immunanlys för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i human urin för att underlätta tidig upptäckt av graviditet.

【PRINCIP】

Graviditetstest är en snabb immunanlys med lateralt flöde för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urinen för att identifiera graviditet. Under testning används en kombination av antikroppar som monoklonala hCG-antikroppar för att selektivt identifiera ökade hCG-nivåer. Analysen utförs genom att placera testet i urinen och avläsa resultatet från de färgade linjerna.

【REAGENSER】

Testet innehåller anti-hCG-partiklar och anti-hCG-beläggning på membranet.

【SÄKERHETSFÖRESKRIFTER】

Läs all information i den här bipacksedeln innan du utför testet.

- Använd inte efter utgångsdatumet som anges på foliepåsen.
- Förvara på en torr plats mellan 2–30 °C. Får inte frysas.
- Använd inte om påsen är öppnad eller skadad.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- För diagnostisk användning *in vitro*. Ej för invärtes bruk.
- Öppna testfoliepåsen först när du ska utföra testet.
- Det använda testet ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

【FÖRVARING OCH STABILITET】

Satsen kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp (2–30 °C). Öppna inte förpackningen förrän du är redo att använda testet. **FÅR INTE FRYSAS.** Använd inte efter utgångsdatumet.

【PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSE】

Urinprovet ska tas i en ren och torr behållare. Vi rekommenderar att du utför testet första gången som du kissar på morgonen eftersom denna urin vanligtvis innehåller den högsta hCG-koncentrationen, men du kan samla in prover för testning när som helst under dagen. Urinprover med synliga partiklar bör centrifugeras, filtreras eller tillåtas sedimentera så att ett klart prov erhålls för testning.

Om urinprovet inte kan detekteras direkt kan det förvaras i upp till 48 timmar före testning vid 2–8 °C. För långvarig förvaring kan prover frysas och förvaras under -20 °C. Frysta prover ska tinas och blandas före analys.


【MATERIAL SOM MEDFÖLJER】

- Tester
- Bruksanvisning
- MATERIAL (KRÄVS MEN TILLHANDAHÅLLS INTE)
- Timer
- Provtagningsbehållare

【ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING】

Låt testet och urinprovet uppnå rumstemperatur (15–30 °C) innan du testar.

1. Låt påsen uppnå rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testmätstickan ur den förseglade påsen och använd mätstickan inom en timme.
2. Placera testmätstickan i urinen för att utföra testet. (**Obs!** Urinprovet får inte överskrida maximilinjens på testet.)
3. Ta ut testmätstickan ur urinprovet efter **15 sekunder** eller håll testmätstickan i urinprovet och starta timern omedelbart.
4. Avläs resultatet efter **3 minuter**. Du får inte tolka resultatet om det har gått mer än 10 minuter.

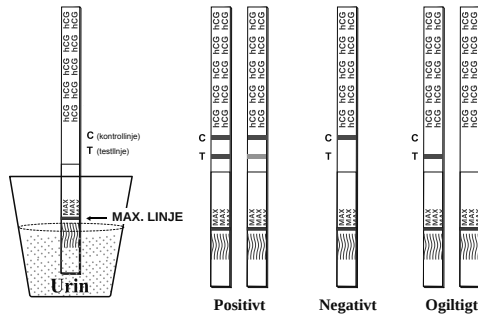

【AVLÄSA RESULTATEN】

POSITIVT: Två färgade linjer framträder. En färgad linje ska synas i kontrollinjeområdet (C) och en annan färgad linje ska synas i testlinjeområdet (T). De behöver inte matcha varandra, utan den ena linjen kan vara ljusare än den andra. Det här resultatet innebär att du troligtvis är gravid.

NEGATIVT: En färgad linje framträder i kontrollinjeområdet (C). Ingen linje framträder i testlinjeområdet (T). Det här resultatet innebär att du troligtvis inte är gravid.

OGILTIGT: Resultatet är ogiltigt om ingen färgad linje visas i kontrollinjeområdet (C), även om en linje visas i testlinjeområdet (T). I så fall bör du göra om testet med ett nytt test.

【KVALITETSKONTROLL】

En procedurkontroll medföljer testet. En färgad linje som framträder i kontrollinjeområdet (C) är en intern procedurkontroll. Den bekräftar tillräcklig provvolym, adekvat membrangenomträngning och korrekt procedurteknik.

【BEGRÄNSNINGAR】

Den här testmätstickan kan ge felaktiga resultat. Rådgör med din läkare innan du tar något medicinskt beslut.

1. Läkemedel som innehåller hCG (till exempel Pregnyl, Profasi, Pergonal och APL) kan leda till ett falskt positivt resultat. Alkohol, orala preventivmedel, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar utan hCG ska inte påverka testresultatet.

2. Mycket utspädda urinprover (som indikeras av en låg specifik vikt) saknar ibland representativa hCG-nivåer. Vid misstänkt graviditet bör ett urinprov från det första toalettbesöket för dagen samlas in 48 timmar senare och testas.
3. Mycket låga hCG-nivåer (mindre än 50 mIU/mL) förekommer i urinprov strax efter implantation. Eftersom ett betydande antal graviditeter avbryts av naturliga skäl, under de första tre månaderna, bör ett svagt positivt testresultat bekräftas medelst omtestning av ett urinprov från det första toalettbesöket för dagen 48 timmar senare.
4. Detta test kan ge falska positiva resultat. Ökade hCG-nivåer kan bero på olika tillstånd utöver graviditet, till exempel trofoblastsjukdom och vissa icke-trofoblastrelaterade tumörer som testikelcancer, prostatacancer, bröstcancer och lungcancer.^{2,3} Dessa tillstånd måste kunna uteslutas för att man ska vara säker på att de ökade hCG-nivåerna i urinen beror på graviditet.
5. Detta test kan ge falska negativa resultat. Falska negativa resultat kan uppstå om hCG-nivåerna ligger under testets känslighetsnivå. Vid misstänkt graviditet bör ett urinprov från det första toalettbesöket för dagen samlas in 48 timmar senare och testas. Kontakta läkare om du misstänker att du är gravid men bara får negativa testresultat.
6. Detta test tillhandahåller en presumtiv graviditetsdiagnos. Graviditetsdiagnoser ska endast ställas av läkare efter att alla kliniska resultat och laboratorieresultat har utvärderats.

【YTTERLIGARE INFORMATION】

1. Hur fungerar testmätstickan?

Graviditetstest används till att detektera ett hormon i urinen som produceras i kroppen vid graviditet (humant koriongonadotropin, hCG). Ju längre in i graviditeten du har kommit, desto mer ökar graviditetshormonerna.

2. När kan jag ta testet om jag misstänker att jag är gravid?

Testet är utformat för att detektera hCG så tidigt som sex dagar före utebliven mens (fem dagar före dagen för förväntad mens). Testet kan utföras när som helst på dagen, men vi rekommenderar under det första toalettbesöket på morgonen eftersom det innehåller mest graviditetshormoner.

3. Måste jag använda urin från det första toalettbesöket för dagen?

Testet kan utföras när som helst på dagen, men urinen från det första toalettbesöket på morgonen är vanligtvis den mest koncentrerade och bör innehålla högst nivå av hCG.

4. Hur tillförlitligt är testet?

En klinisk utvärdering utfördes, där resultatet från ett hCG-graviditetssnabbtest med ökad känslighet med mätsticka jämfördes med resultatet från ett annat kommersiellt tillgängligt hCG-urintest. Den kliniska studien för konsumenter omfattade 608 urinprov där båda analyserna identifierade 231 positiva och 377 negativa resultat. Resultatet visade över 99 % total noggrannhet för Graviditetstest jämfört med det andra hCG-urintestet.

5. Hur pass känsligt är testet?

Graviditetstest detekterar hCG i urin med koncentrationen 25 mIU/mL eller högre. Testet är standardiserat enligt internationell W.H.O.-standard. Tillsats av LH (300 mIU/mL), FSH (1 000 mIU/mL) och TSH (1 000 µIU/mL) till negativa (0 mIU/mL hCG) och positiva (25 mIU/mL hCG) prover visade ingen korsreaktivitet.

6. Vad gör jag om resultatet visar att jag är gravid?

Detta innebär att din urin innehåller hCG och att du troligtvis är gravid. Kontakta din läkare för att bekräfta och diskutera vilka åtgärder du bör vidta.

7. Hur vet jag att testet har använts på rätt sätt?

Om en färgad linje visas i kontrollinjeområdet (C) har du utfört testet på rätt sätt med tillräcklig mängd urin.

8. Vad gör jag om resultatet visar att jag inte är gravid?

I dessa fall har ingen hCG upptäckts i urinen och du är förmodligen inte gravid. Om menstruationen inte kommer igång inom en vecka efter förväntat datum utför du ett nytt test. Om du får samma resultat efter det nya provet och fortfarande inte fått din mens bör du kontakta läkare.

Distributör:

Health Nordic A/S
Roskildevej 328
2630 Taastrup, Denmark
info@health-nordic.com

【REFERENSER】

1. Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394
2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Symbolindex

	Se bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen		Innehåller tillräckligt för <n> tester		Temperaturgränser
	In vitro-diagnostisk medicinsk produkt		Tillverkningsssatskod		Katalognummer
	Auktoriserad representant i EU		Utgångsdatum		Får inte återanvändas
	Använd inte om förpackningen är skadad, se bruksanvisningen		Tillverkare		Försiktighet

【KÄYTTÖTARKOITUS】

hCG-raskauden pikatestin mittatikku on nopea kromatografinen pikaimmuunimääritys, joka on tarkoitettu ihmisen koriongonadotropiinin kvalitatiiviseen määrittämiseen virtsasta, mikä auttaa raskauden varhaisessa havaitsemisessa.

【TOIMINTAPERIAATE】

hCG-raskauden pikatestin mittatikku on nopea, yksivaiheinen lateraalivirtaukseen perustuva kromatografinen pikaimmuunimääritys, joka on tarkoitettu ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kvalitatiiviseen määrittämiseen virtsasta, mikä auttaa raskauden varhaisessa havaitsemisessa. Testi hyödyntää vasta-aineita, mukaan lukien monoklonaalista hCG-vasta-ainetta, kohonneiden hCG-tasojen valikoivaan havaitsemiseen. Määritys suoritetaan lisäämällä virtsaa hydrofiiliseen tikkuun ja lukemalla tulos värillisistä viivoista.

【REAGENSsit】

Testi sisältää anti-hCG-hiukkasia ja kalvolle sidottua anti-hCG-vasta-ainetta.

【VAROTOIMET】

Lue koko pakkausseloste ennen testin tekemistä.

- Älä käytä foliopussiin painetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Säilytä kuivassa paikassa 2–30 °C:ssa (35,6–86 °F). Älä pakasta.
- Ei saa käyttää, jos pussi on revennyt tai vaurioitunut.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- In vitro* -diagnostiseen käyttöön. Ei saa käyttää sisäisesti.
- Pidä liuskatestin foliopussi suljettuna testin käyttöön saakka.
- Hävitä käytetty liuskatesti paikallisten määräysten mukaan.

【SÄILYTYS JA VAKAUS】

Pakkausta säilytetään huoneenlämmössä tai jääkaapissa (2–30 °C). Pidä pussi suljettuna käyttöön saakka. **Ei SAA PAKASTAA.** Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

【NÄYTTÉENOTTO JA VALMISTELUT】

Virtsanäyte on kerättävä puhtaaseen ja kuivaan astiaan. Ensimmäisen aamuvirtsan käyttäminen näyteenä on suositeltavaa, sillä se sisältää yleisesti korkeimman hCG-pitoisuuden. Mihin aikaan päivästä tahansa kerättyjä virtsanäytteitä voi kuitenkin käyttää. Mikäli virtsanäytteessä on näkyviä hiukkasia, näyte on sentrifugoitava tai suodatettava tai hiukkasten on annettava laskeutua, jotta saadaan kirkas näyte testausta varten.

Jos virtsanäytettä ei voida tutkia välittömästi, sitä on säilytettävä 2–8 °C:ssa enintään 48 tunnin ajan ennen testausta. Näytteitä voidaan säilyttää pitkäkestoisesti pakastettuina alle –20 °C:ssa. Pakastetut näytteet on sulatettava ja sekoitettava ennen testausta.

【SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT】

- Liuskakokeet
- Pakkausseloste


【VAADITTAVAT MATERIAALIT, JOITA EI TOIMITETA PAKKAUKSEN MUKANA】

- Ajastin
- Näytteenottoastia

【OHJEET】

Anna testin ja virtsanäyteen lämmetä huoneenlämpöön (15–30 °C) ennen testausta.

- Määritä testauksen aloituspäivä. (Katso edellä oleva osio: MILLOIN TESTAUS ALOITETAAN).
- Anna pussin lämmetä huoneenlämpöön ennen sen avaamista. Ota liuskakoe suljetusta pussista ja käytä se välittömästi yhden tunnin kuluessa.
- Suuntaa nuolet virtsanäytettä kohti ja kasta liuskakoe pystysuorassa asennossa virtsanäytteeseen vähintään **10–15 sekunnin ajaksi**. Älä upota liuskakoetta siinä olevaa **maksimiviivaa (MAX)** syvemmälle. Katso jäljempänä olevaa kuvaa.
- Aseta liuskakoe imukyvyttömälle ja tasaiselle pinnalle, käynnistä ajastin ja odota värillisten viivojen ilmestymistä. **Lue tulos 3 minuutin kuluttua.** Älä tulkitse tulosta enää 10 minuutin kuluttua.

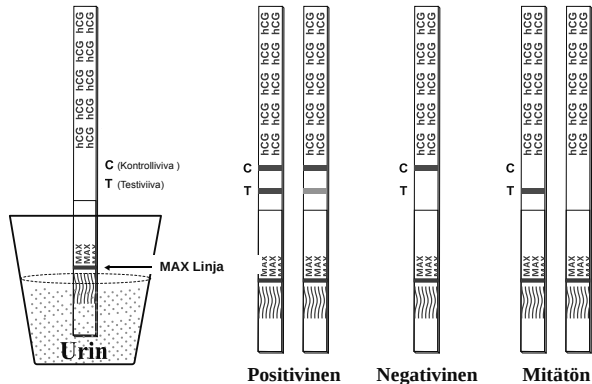

【TULOSTEN LUKEMINEN】

POSITIIVINEN: Näkyviin tulee kaksi värillistä viivaa. Kontrolliviivayhdykkeellä (C) on yksi viiva ja testialueella (T) toinen viiva. Toinen viiva voi olla toista vaaleampi; niiden ei tarvitse olla samanlaisia. Tämä tarkoittaa, että olet luultavasti raskaana.

NEGATIIVINEN: Kontrolliviivayhdykkeellä (C) on yksi värillinen viiva. Testialueella (T) ei ole viivaa. Tämä tarkoittaa, että et ole luultavasti raskaana.

MITÄTÖN: Tulos on mitätön, jos kontrolliviivayhdykkeelle (C) ei ilmesty lainkaan värillistä viivaa, vaikka testialueella (T) näkyy viiva. Testi on toistettava uudella liuskatestillä.

【LAADUNVALVONTA】

Jokainen testi sisältää laadunvalvontakontrollin. Kontrolliviivayhdykkeelle (C) muodostuva värillinen viiva on osoitus testin sisäisestä laadunvalvonnasta. Viiva muodostuu, kun näytettä on ollut riittävästi, kalvon virtaus on toiminut moitteettomasti ja testi on suoritettu oikein.

【RAJOITUKSET】

On mahdollista, että liuskatesti antaa vääriä tuloksia. Keskustele lääkärin kanssa ennen lääketieteellisten päätösten tekemistä.

- Lääkkeet, jotka sisältävät hCG:tä (kuten Pregnyl, Profasi, Pergonal ja APL), voivat aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen. Alkoholin, suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden, särkylääkkeiden, antibioottien tai hormonihoitojen, jotka eivät sisällä hCG:tä, ei pitäisi vaikuttaa testitulokseen.
- Erittäin laimeat virtsanäytteet, minä ilmaisee niiden alhainen ominaispaino, eivät ehkä sisällä riittäviä hCG-tasoja. Jos raskautta edelleen epäillään, ensimmäinen aamuvirtsanäyte on kerättävä 48 tunnin kuluttua ja testattava.
- Erittäin alhaisia hCG-tasoja (alle 50 mIU/ml) on virtsassa vähän aikaa munasolun kiinnittymisen jälkeen. Koska merkittävä määrä raskauksista päättyy ensimmäisen kolmanneksen aikana luonnollisista syistä,¹ heikoisti positiivinen testitulos on vahvistettava suorittamalla testi uudelleen ensimmäisestä aamuvirtsanäytteestä, joka on kerätty 48 tunnin kuluttua.
- Testi voi antaa vääriä positiivisia tuloksia. Useat muut tilat kuin raskaus, mukaan lukien trofoblastisairaus ja tietyt muut kuin trofoblastiset kasvaimet, myös kivesten kasvaimet, eturauhassyöpä, rintasyöpä ja keuhkosityöpä, voivat aiheuttaa kohonneita hCG-tasoja.^{2,3} Sen vuoksi hCG:n esiintymistä virtsassa ei saa käyttää raskauden diagnosointiin, ellei edellä mainittuja tiloja ole suljettu pois.
- Testi voi antaa vääriä negatiivisia tuloksia. Vääriä negatiivisia tuloksia voi tulla, kun hCG-tasot alittavat testin herkkyystason. Kun raskautta edelleen epäillään, ensimmäinen aamuvirtsanäyte on kerättävä 48 tunnin kuluttua ja testattava. Jos raskautta epäillään ja testi antaa edelleen negatiivisia tuloksia, ota yhteyttä lääkäriin diagnoosia varten.
- Tämä testi antaa raskautta koskevan oletusdiagnoosin. Vain lääkäri voi tehdä vahvistetun raskausdiagnoosin sen jälkeen, kun kaikki kliiniset laboratoriolöydökset on arvioitu.

【LISÄTIEDOT】

1. Miten liuskatesti toimii?

hCG-raskauden pikatestin mittatikku havaitsee virtsasta hormonin, jota keho tuottaa raskauden aikana (hCG, ihmisen koriongonadotropiini). Raskaushormonin määrä kasvaa raskauden edetessä.

2. Kuinka pian sen jälkeen, kun epäilen olevani raskaana, voin tehdä testin?

Testin voi tehdä jo jopa ensimmäisenä kuukautiskieron päivänä, kun vuoto on päässyt tulematta. Testin voi tehdä mihin aikaan päivästä tahansa. Jos kuitenkin olet raskaana, ensimmäinen aamuvirtsassa sisältää eniten raskaushormonia.

3. Onko testi tehtävä ensimmäisestä aamuvirtsasta?

Vaikka testin voi tehdä mihin aikaan päivästä tahansa, ensimmäisessä aamuvirtsassa on yleensä päivän suurimmat pitoisuudet ja siinä on myös eniten hCG:tä.

4. Kuinka tarkka testi on?

Kliininen arviointi suoritettiin vertaamalla hCG-raskauden pikatestin mittattikkulla saatuja tuloksia toiseen kaupallisesti saatavaan virtsasta tehtävään hCG-testiin. Kliinisessä kuluttajatuotkimuksessa käytettiin 608:aa virtsanäytettä: molemmissa määrittelyissä tunnistettiin 231 positiivista ja 377 negatiivista tulosta. Tulokset osoittivat hCG-raskauden pikatestin mittattikkun kokonaistarkkuuden olevan >99 %, kun sitä verrattiin toiseen hCG-virtsatestiin.

5. Kuinka herkkä testi on?

hCG-raskauden pikatestin mittatikku havaitsee virtsassa olevan hCG:n, kun sen pitoisuus on vähintään 25 mIU/ml. Testi on standardoitu WHO:n kansainvälisen standardin mukaan. LH:n (300 mIU/ml), FSH:n (1 000 mIU/ml) ja TSH:n (1 000 µIU/ml) lisääminen negatiivisiin (0 mIU/ml hCG) ja positiivisiin (25 mIU/ml hCG) näytteisiin ei osoittanut ristireaktiivisuutta.

6. Miten toimin, jos testitulos osoittaa, että olen raskaana?

Se tarkoittaa, että virtsassasi on hCG:tä ja olet luultavasti raskaana. Ota yhteyttä lääkäriin, jotta raskautesi varmistetaan ja voit keskustella siitä, miten toimia tästä eteenpäin.

7. Miten voin tietää, että testi on suoritettu asianmukaisesti?

Värillisen viivan ilmestyminen kontrolliviivayhdykkeelle (C) kertoo, että noudatit testimenettelyä asianmukaisesti ja että riittävä määrä virtsaa imeytyi testiin.

8. Miten toimin, jos testitulos osoittaa, että en ole raskaana?

Se tarkoittaa, että virtsassasi ei ole havaittu hCG:tä ja luultavasti et ole raskaana. Jos kuukautisesi eivät ala viikon kuluessa niiden määräpäivästä, suorita testi uudelleen uudella liuskatestillä. Jos saat saman tuloksen testin toistamisen jälkeen eivätkä kuukautisesi ole edelleenkaan alkaneet, ota yhteyttä lääkäriin.

【LÄHTEET】

- Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394
- Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
- Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Symboli luettelo			
	Lue käyttöohjeet		Testien lukumäärä yhtä pakkausta kohti
	Vain <i>in vitro</i> diagnostiseen käyttöön		Viimeinen käyttöpäivä
	Säilytä 2–30 °C:ssa		Eränumero
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut		Valmistaja
			Valtuutettu edustaja EU:ssa
			Ei saa käyttää uudelleen
			Luettelonumero

Hitri test za ugotavljanje nosečnosti hCG s testnimi lističi (urin)

REF FHC-101H | Za samotestiranje | Slovenščina

【PREDVIDENA UPORABA】

Hitri test za ugotavljanje nosečnosti hCG s testnimi lističi (urin) je hitri kromatografski imunski test za kvalitativno zaznavanje humanega horionskega gonadotropina (hCG) v človeškem urinu, kar je lahko v pomoč pri zgodnjem ugotavljanju nosečnosti.

【NAČELO DELOVANJA】

Hitri test za ugotavljanje nosečnosti hCG s testnimi lističi je hitri imunski test na podlagi lateralnega vleka, ki se izvede v enem koraku, za kvalitativno zaznavanje humanega horionskega gonadotropina (hCG) v urinu, kar je lahko v pomoč pri ugotavljanju nosečnosti. Test uporablja kombinacijo protiteles, vključno z monoklonskim protitelesom hCG, za selektivno zaznavanje povišanih ravni hormona hCG. Test se izvede tako, da test pomočite v urin in odčitate rezultat iz obarvane črte.

【REAGENTI】

Test vsebuje delce anti-hCG in anti-hCG, s katerimi je premazana membrana.

【PREVIDNOSTNI UKREPI】

Pred opravljanjem testa preberite vse informacije v tem navodilu za uporabo.

- Testa ne uporabljajte, če je potekel rok uporabe, ki je natisnjen na ovojnini testa.
- Shranjujte na suhem mestu pri temperaturi od 2 do 30 °C. Ne shranjujte v zamrzovalniku.
- Testa ne uporabljajte, če je ovojnina raztrgana ali poškodovana.
- Hranite nedosegljivo otrokom.
- Za diagnostično uporabo *in vitro*. Ni za notranjo uporabo.
- Ne odprite ovojnine testa, dokler niste pripravljeni, da opravite test.
- Uporabljeni test zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

【SHRANJEVANJE IN OBSTOJNOST】

Komplet lahko hranite pri sobni temperaturi ali v hladilniku (pri temperaturi od 2 do 30 °C). Ovojnine ne odpirajte, dokler niste pripravljeni na uporabo. **NE HRANITE V ZAMRZOVALNIKU.** Testa ne uporabljajte, če je potekel rok uporabe.

【ODVZEM VZORCA IN PRIPRAVA NA ANALIZO】

Vzorec urina je treba odvzeti v čisto in suho posodico. Najprimernejši je prvi jutranji urin, saj ta običajno vsebuje najvišje koncentracije hormona hCG, vendar lahko uporabite vzorce urina, odvzete v katerem koli delu dneva. Če so v vzorcu urina vidni delci, jih centrifugirajte, prefiltrirajte ali pa počakajte, da se delci posedejo, da bo vzorec za testiranje čist.

Če vzorca urina ne morete uporabiti takoj, ga lahko hranite pri temperaturi od 2 do 8 °C največ 48 ur pred testiranjem. Če je potrebno daljše shranjevanje, lahko vzorec zamrznete in shranite pri temperaturi, nižji od -20 °C. Zamrznjeni vzorec je treba pred testiranjem odmrzniti in premešati.


【PRILOŽENI PRIPOMOČKI】

- Testni lističi
- Navodilo za uporabo
- **【PRIPOMOČKI, KI JIH POTREBUJETE, VENDAR NISO PRILOŽENI】**
- Odštevalnik časa
- Posodica za zbiranje vzorca

【NAVODILA ZA UPORABO】

Pred testiranjem počakajte, da se test in vzorec ogrejeta ali ohladita na sobno temperaturo (od 15 do 30 °C).

1. Preden odprete ovojnino, počakajte, da se segreje ali ohladi na sobno temperaturo. Vzemite testno merilno paličico iz zaprte ovojnine in jo uporabite v roku ene ure.
2. Testni lističi pomočite v urin (**Opomba:** Vzorec urina ne sme segati višje od črte »Maximum« na testu).
3. Vzemite testni listič iz vzorca urina po **15 sekundah** ali pustite, da testna merilna paličica ostane v vzorcu urina in takoj zaženite odštevalnik časa.
4. Rezultat odčitajte po **3 minutah**; rezultata ne odčitavajte po 10 minutah.

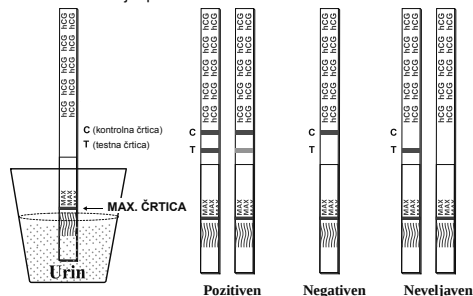

【ODČITAVANJE REZULTATOV】

POZITIVEN REZULTAT: Pojavita se dve obarvani črtici. Ena obarvana črtica se mora pojaviti v kontrolnem predelu (C), druga obarvana črtica pa v testnem predelu (T). Ena črtica je lahko svetlejša od druge; ni treba, da sta črtici povsem enaki. To pomeni, da ste verjetno noseči.

NEGATIVEN REZULTAT: Pojavi se ena obarvana črtica v kontrolnem predelu (C). V testnem predelu (T) se ne pojavi črtica. To pomeni, da verjetno niste noseči.

NEVELJAVEN REZULTAT: Rezultat je neveljaven, če se v kontrolnem predelu (C) ne pojavi nobena obarvana črtica, tudi če se v testnem predelu (T) pojavi črtica. Test ponovite z novim testom.

【KONTROLA KAKOVOSTI】

Test vključuje kontrolo postopka. Črtica, ki se pojavi v kontrolnem predelu (C), predstavlja notranjo kontrolo postopka. Potrjuje, da je vzorec vseboval dovolj urina, da se je membrana dovolj napojila in da je bil uporabljeni postopek pravilen.

【OMEJITVE】

Obstaja možnost, da testna merilna paličica pokaže napačen rezultat. Preden sprejmete kakršne koli zdravstvene odločitve, se posvetujte s svojim zdravnikom.

1. Zaradi zdravil, ki vsebujejo hormon hCG (npr. Pregnyl, Profasi, Menopur, APL), je lahko rezultat testa lažno pozitiven. Alkohol, peroralna kontracepcija, protibolečinske tablete, antibiotiki ali hormonske terapije, ki ne vsebujejo hormona hCG, naj ne bi vplivali na rezultate testa.
2. Zelo razredčeni vzorci urina, na kar kaže njihova nizka specifična teža, morda ne vsebujejo reprezentativnih ravni hormona hCG. Če še vedno sumite, da ste noseči, 48 ur po prvem testu odvzemite vzorec prvega jutranjega urina in ponovite test.
3. Kmalu po implantaciji so v vzorcih urina prisotne zelo nizke ravni hormona hCG (manj kot 50 mIU/ml). Vendar je treba rezultat šibko pozitivnega testa potrditi tako, da 48 ur po prvem testu odvzamete vzorec prvega jutranjega urina in test ponovite, saj se znatno število nosečnosti v prvih treh mesecih konča iz naravnih razlogov.¹
4. Rezultati tega testa so lahko lažno pozitivni. Povišane ravni hormona hCG lahko poleg nosečnosti povzročijo tudi številna bolezenska stanja, vključno s trofoblastno boleznijo in nekaterimi netrofoblastnimi neoplazmami, kot so tumorji na modih, rak prostate, rak dojke in pljučni rak.^{2,3} Zato prisotnosti hormona hCG v urinu ne smete uporabljati za diagnosticiranje nosečnosti, če niso bila izključena navedena bolezenska stanja.
5. Rezultati tega testa so lahko lažno negativni. Do lažno negativnih rezultatov lahko pride, ko je raven hormona hCG nižja od stopnje občutljivosti testa. Če še vedno sumite, da ste noseči, 48 ur po prvem testu odvzemite vzorec prvega jutranjega urina in ponovite test. Če sumite, da ste noseči, rezultati testa pa so še vedno negativni, obiščite zdravnika, ki bo lahko postavil nadaljnje diagnoze.
6. Ta test postavlja domnevno diagnozo nosečnosti. Diagnozo nosečnosti lahko dokončno potrdi šele zdravnik po oceni vseh kliničnih in laboratorijskih ugotovitev.

【DODATNE INFORMACIJE】

1. Kako deluje testni listič?

Hitri test za ugotavljanje nosečnosti hCG s testnim lističem v vašem urinu zazna hormon, ki ga telo proizvaja med nosečnostjo (hormon hCG – humani horionski gonadotropin). Količina nosečnostnega hormona se viša z napredovanjem nosečnosti.

2. Kako kmalu po tem, ko posumim, da sem noseča, lahko opravim test?

Svoj urin lahko testirate že prvi dan, ko vam izostane menstruacija. Test lahko opravite ob kateri koli uri v dnevu, vendar velja, da prvi jutranji urin vsebuje največjo količino nosečnostnega hormona, če ste noseči.

3. Ali moram test opraviti s prvim jutranjim urinom?

Čeprav lahko test opravite ob kateri koli uri v dnevu, je vaš prvi jutranji urin običajno najbolj koncentriran urin, ki torej vsebuje največ hormona hCG.

4. Kako zanesljiv je test?

Opravljen je bila klinična študija, v kateri so primerjali rezultate hitrega testa za ugotavljanje nosečnosti hCG z merilno paličico z rezultati drugega urinskega testa hCG, razpoložljivega na tržišču. Potrošniška klinična raziskava je zajemala 608 vzorcev urina: oba testa sta odkrila 231 pozitivnih in 377 negativnih rezultatov. Rezultati so pokazali več kot 99-odstotno splošno natančnost hitrega testa za ugotavljanje nosečnosti hCG z merilno paličico v primerjavi z drugim urinskim testom hCG.

5. Kako občutljiv je test?

Hitri test za ugotavljanje nosečnosti hCG s testnim lističem zazna prisotnost hormona hCG v urinu pri koncentraciji 25 mIU/ml ali več. Test je bil standardiziran v skladu z mednarodnim standardom SZO. Pri dodajanju hormona LH (300 mIU/ml), hormona FSH (1.000 mIU/ml) in hormona TSH (1.000 µIU/ml) negativnim (0 mIU/ml hCG) in pozitivnim (25 mIU/ml hCG) vzorcem ni prišlo do nikakršne navzkrižne reaktivnosti.

6. Kaj naj storim, če rezultat pokaže, da sem noseča?

To pomeni, da je v vašem urinu prisoten hormon hCG, torej ste verjetno noseči. Obiščite zdravnika, ki bo lahko potrdil vašo nosečnost, in se z njim pogovorite o naslednjih korakih.

7. Kako naj vem, da je bil test pravilno opravljen?

Če se v kontrolnem predelu (C) pojavi obarvana črtica, to pomeni, da ste postopek testiranja izvedli pravilno in da je bila absorbirana ustrezna količina urina.

8. Kaj naj storim, če rezultat pokaže, da nisem noseča?

To pomeni, da v vašem urinu ni bilo mogoče zaznati hormona hCG, torej verjetno niste noseči. Če še vedno ne dobite menstruacije v roku enega tedna od dne, ko bi jo morali dobiti, ponovite test z novim testom. Če so tudi rezultati ponovljenega testa enaki in če še vedno nimate menstruacije, obiščite zdravnika.

【VIRI】

1. Steier JA, P Bergsjo, OL Myking: Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391–394
2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman: Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172–181
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross: Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39–45

Kazalo simbolov					
	Upošteвайте navodila za uporabo.		Število testov v kompletu		Pooblaščen zastopnik
	Medicinski pripomoček za diagnostično uporabo <i>in vitro</i>		Rok uporabnosti		Za enkratno uporabo
	Shranjujte pri temperaturi med 2 in 30 °C.		Številka serije		Kataloška številka
	Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana.		Proizvajalec		



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster,
Germany

【VERWENDUNGSZWECK】

Der hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen (Urin) ist ein schneller chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im menschlichen Urin für die Früherkennung einer Schwangerschaft.

【PRINZIP】

Der hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen ist ein schneller, einstufiger Lateral-Flow-Immunassay zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin für den Nachweis einer Schwangerschaft. Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, einschließlich eines monoklonalen hCG-Antikörpers, um selektiv erhöhte hCG-Konzentrationen nachzuweisen. Der Test wird durch Eintauchen des Teststreifens in Urin durchgeführt, und das Ergebnis wird anhand der farbigen Linien ermittelt.

【REAGENZIEN】

Der Test enthält Anti-hCG-Partikel und eine mit Anti-hCG beschichtete Membran.

【VORSICHTSMASSNAHMEN】

Lesen Sie vor Durchführung des Tests diese Packungsbeilage sorgfältig und vollständig durch.

- Nach Ablauf des auf der Folienverpackung aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- An einem trockenen Ort bei 2–30 °C (35,6–86 °F) lagern. Nicht tiefkühlen.
- Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung eingerissen oder beschädigt ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- *In-vitro*-Diagnostikum. Nicht zur innerlichen Anwendung – nicht einnehmen!
- Die Testfolienverpackung erst öffnen, wenn Sie mit dem Test beginnen können.
- Gebrauchte Tests sind gemäß den örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

【LAGERUNG UND HALTBARKEIT】

Das Kit kann bei Raumtemperatur oder gekühlt (2–30 °C) aufbewahrt werden. Die Folienverpackung erst unmittelbar vor der Verwendung öffnen. **NICHT TIEFKÜHLEN.** Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

【PROBENAHME UND VORBEREITUNG】

Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Behälter gesammelt werden. Der erste Morgenurin ist dabei zu bevorzugen, da dieser normalerweise die höchste hCG-Konzentration enthält. Es können jedoch auch Urinproben verwendet werden, die zu anderen Tageszeiten abgegeben wurden. Urinproben, die sichtbare Partikel enthalten, müssen zentrifugiert oder gefiltert werden, oder es wird abgewartet, bis sich die Partikel abgesetzt haben, um eine klare Probe für den Test zu erhalten.

Falls Urinproben nicht sofort untersucht werden können, können sie vor dem Test bis zu 48 Stunden lang bei 2–8 °C gelagert werden. Zur längeren Lagerung können die Proben eingefroren und bei unter –20 °C gelagert werden. Eingefrorene Proben müssen vor dem Test aufgetaut und gemischt werden.

【MITGELIEFERTER MATERIALIEN】

- Teststreifen
- Packungsbeilage


【NICHT MITGELIEFERT, ABER ERFORDERLICHE MATERIALIEN】

- Zeitmesser
- Probensammelbehälter

【GEBRAUCHSANWEISUNG】

Bringen Sie das Produkt und die Probe vor dem Test auf Raumtemperatur (15–30 °C).

1. Warten Sie vor dem Öffnen der versiegelten Folienverpackung, bis die Folienverpackung Raumtemperatur erreicht hat. Nehmen Sie den Teststreifen aus der versiegelten Folienverpackung, und führen Sie den Test innerhalb einer Stunde durch.
2. Tauchen Sie den Teststreifen in Urin (**Hinweis:** Die Urinprobe darf die Maximum-Linie des Tests nicht überschreiten).
3. Nehmen Sie den Teststreifen nach **15 Sekunden** aus der Urinprobe. Wahlweise können Sie auch den Teststreifen in der Urinprobe belassen und sofort den Zeitmesser starten.
4. **Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab.** Nach Ablauf von 10 Minuten darf das Ergebnis nicht mehr ausgewertet werden.

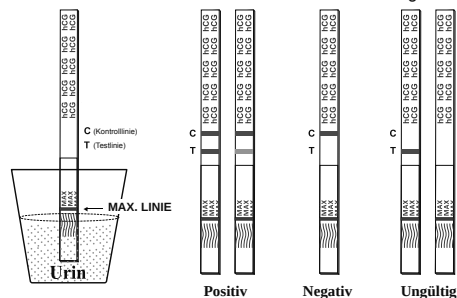

【INTERPRETATION DER ERGEBNISSE】

POSITIV: Zwei farbige Linien sind sichtbar. Eine farbige Linie sollte im Kontrollbereich (C) und eine andere farbige Linie im Testlinienbereich (T) zu sehen sein. Die Färbung einer Linie kann heller ausfallen als die der anderen; sie müssen nicht übereinstimmen. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.

NEGATIV: Eine farbige Linie ist im Kontrolllinienbereich (C) sichtbar. Im Testlinienbereich (T) ist keine Linie sichtbar. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind.

UNGÜLTIG: Das Ergebnis ist ungültig, wenn im Kontrolllinienbereich (C) keine farbige Linie vorhanden ist, auch wenn im Testlinienbereich (T) eine Linie vorhanden ist. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen.

【QUALITÄTSKONTROLLE】

Im Test ist eine Verfahrenskontrolle enthalten. Eine farbige Linie im Kontrolllinienbereich (C) bedeutet, dass der Test korrekt ausgeführt wurde. Diese Linie bestätigt einen ausreichenden Probenaufruf, eine ausreichende Membrandurchfeuchtung und die korrekte Durchführung des Tests.

【EINSCHRÄNKUNGEN DES TESTS】

Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Teststreifen falsche Ergebnisse liefert. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie medizinische Entscheidungen treffen.

1. Medikamente, die hCG enthalten (wie Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), können zu einem falsch-positiven Ergebnis führen. Alkohol, orale Verhütungsmittel, Schmerzmittel, Antibiotika oder Hormontherapien, die kein hCG enthalten, sollten das Testergebnis nicht beeinflussen.
2. Sehr verdünnte Urinproben, die sich durch ein niedriges spezifisches Gewicht auszeichnen, weisen möglicherweise keine repräsentativen hCG-Konzentrationen auf. Wenn der Verdacht auf Schwangerschaft weiterhin besteht, sollte nach 48 Stunden eine Probe des ersten Morgenurins genommen und getestet werden.
3. Urinproben weisen kurz nach der Einnistung sehr niedrige hCG-Konzentrationen (weniger als 50 mIE/ml) auf. Da jedoch eine beträchtliche Anzahl von Schwangerschaften bereits im ersten Trimester aus natürlichen Gründen enden¹, sollte ein schwach positives Testergebnis durch einen erneuten Test nach 48 Stunden mit einer Probe des ersten Morgenurins bestätigt werden.
4. Dieser Test kann zu falsch-positiven Ergebnissen führen. Neben einer Schwangerschaft können eine Reihe von Erkrankungen, darunter trophoblastische Erkrankungen und bestimmte nicht-trophoblastische Neoplasmen, einschließlich Hodentumoren, Prostatakrebs, Brustkrebs und Lungenkrebs, zu einem erhöhten hCG-Spiegel führen^{2,3}. Daher sollte das Vorhandensein von hCG im Urin nicht zur Diagnose einer Schwangerschaft verwendet werden, es sei denn, diese Erkrankungen wurden ausgeschlossen.
5. Dieser Test kann zu falsch-negativen Ergebnissen führen. Falsch-negative Ergebnisse können auftreten, wenn die hCG-Spiegel unter der Sensitivitätsgrenze des Tests liegen. Besteht der Verdacht auf Schwangerschaft weiterhin, sollte nach 48 Stunden eine Probe des ersten Morgenurins entnommen und getestet werden. Wird eine Schwangerschaft vermutet und die Ergebnisse des Tests fallen weiterhin negativ aus, suchen Sie zur weiteren Diagnose einen Arzt auf.
6. Dieser Test bietet eine vorläufige Diagnose auf Schwangerschaft. Eine bestätigte Diagnose auf Schwangerschaft darf nur von einem Arzt gestellt werden, nachdem alle klinischen und Laborbefunde ausgewertet wurden.

【ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN】

1. Wie funktioniert der Teststreifen?

Der hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen weist ein Hormon im Urin nach, das der Körper während der Schwangerschaft produziert (humanes Choriongonadotropin, hCG). Die Menge des Schwangerschaftshormons nimmt mit Fortschreiten der Schwangerschaft zu.

2. Wie schnell kann ich den Test durchführen, wenn ich vermute, dass ich schwanger bin?

Sie können Ihren Urin bereits am ersten Tag des Ausbleibens Ihrer Periode testen. Sie können den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Sollten Sie jedoch schwanger sein, enthält der erste Morgenurin die höchste Konzentration des Schwangerschaftshormons.

3. Muss ich den ersten Morgenurin testen?

Auch wenn Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen können, weist Ihr erster Morgenurin in der Regel die höchste Konzentration an hCG im Verlauf des Tages auf.

4. Welche Genauigkeit weist der Test auf?

Es wurde eine klinische Evaluierung durchgeführt, bei der die mit dem hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen ermittelten Ergebnisse mit einem anderen handelsüblichen Urin-hCG-Test verglichen wurden. Die klinische Verbraucherstudie umfasste 608 Urinproben: Beide Tests identifizierten 231 positive und 377 negative Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigten eine Gesamtgenauigkeit von > 99 % für den hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen im Vergleich zum anderen Urin-hCG-Test.

5. Welche Sensitivität weist der Test auf?

Der hCG-Schwangerschaftsschnellteststreifen erkennt hCG im Urin ab einer Konzentration von 25 mIE/ml. Der Test wurde entsprechend dem internationalen Standard der W.H.O. genormt. Das Hinzufügen von LH (300 mIE/ml), FSH (1000 mIE/ml) und TSH (1000 µIE/ml) zu negativen (0 mIE/ml hCG) und positiven (25 mIE/ml hCG) Proben führte zu keinerlei Kreuzreaktivität.

6. Was soll ich machen, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin?

Es bedeutet, dass Ihr Urin hCG enthält und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um Ihre Schwangerschaft zu bestätigen, und besprechen Sie die Schritte, die Sie unternehmen sollten.

7. Woher weiß ich, dass der Test richtig ausgeführt wurde?

Das Erscheinen einer farbigen Linie im Kontrolllinienbereich (C) zeigt an, dass Sie das Testverfahren ordnungsgemäß durchgeführt haben und die richtige Urinmenge absorbiert wurde.

8. Was soll ich machen, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?

Es bedeutet, dass in Ihrem Urin kein hCG nachgewiesen wurde und Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Wenn Ihre Periode nicht innerhalb einer Woche nach dem Fälligkeitsdatum einsetzt, wiederholen Sie das Verfahren mit einem neuen Test. Wenn Sie nach der Wiederholung des Tests das gleiche Ergebnis erhalten und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

【BIBLIOGRAPHIE】

1. Steier JA, P Bergsjö, OL Myking Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after induced abortion, spontaneous abortion and removed ectopic pregnancy, Obstet Gynecol. 1984; 64(3): 391-394
2. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 1977; 50(2): 172-181
3. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms, Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 39-45

Symbolverzeichnis			
	Gebrauchsanweisung beachten		Tests pro Kit
	In-vitro-Diagnostikum		Verwendbar bis
	Bei 2–30 °C lagern		Chargennummer
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Hersteller
			Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
			Artikelnummer